

SC

Módulo Sort Connect

O **H**igh **S**peed **S**orter




INFORMAÇÕES

Módulo Sort Connect

Para conectar o HSS a uma linha de esteira analítica::

- Por exemplo, ao Roche cobas p671
- Outros, mediante solicitação

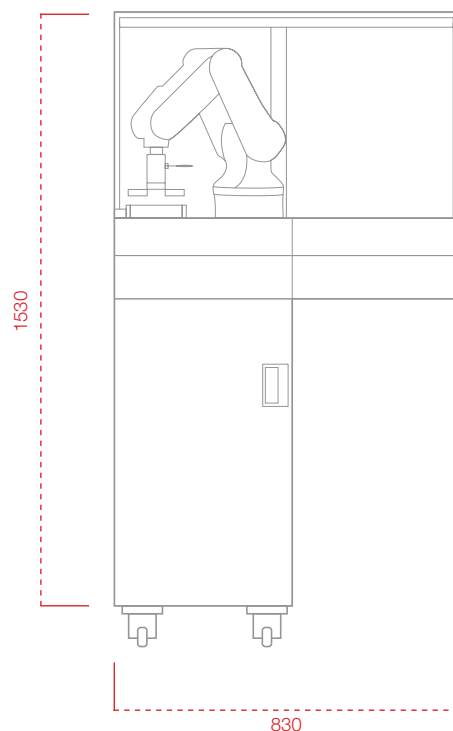

830 x 760 x 1530 mm (L x P x A)

Especificações técnicas

Robôs:	Braço robótico de 6 eixos com pinça especial
Funcionamento:	Transfere os tubos individualmente ou na rack para a área de entrada de uma linha esteira analítica
Produtividade:	Até 1200 tubos/hora
Dimensões:	Ver esboço
Peso:	aprox. 110 kg

O módulo SC atua como um elo entre o High Speed Sorter HSS e uma linha de análise. Este transfere tubos de amostras individuais ou racks com tubos para a área de entrada da linha esteira analítica. Este transfere tubos de amostra individuais ou racks com tubos para a área de entrada da linha de esteira analítica. No entanto, oferece a possibilidade de fornecer para a linha tubos sem pedido de análise, separados em racks específicos do analisador, para a transferência manual para outras locais de trabalho.

No sistema modular, o módulo SC encontra-se na última posição e representa a ligação para a linha de análise.

SARSTEDT Ltda.
Rodovia Marechal Rondon, km 126
Avecuia
CEP 18546-412
Porto Feliz – SP
Tel: +55 11 4152 2233
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com